

FR




ACROMA^{QS}

**POUR TOUTES
LES COULEURS
DE PEAU**

Laser 1064 nm / 532 nm fractionné
non-ablatif déclenché (Q-Switched)



ETHEREA-MX[®]
ACROMA-QS[®]

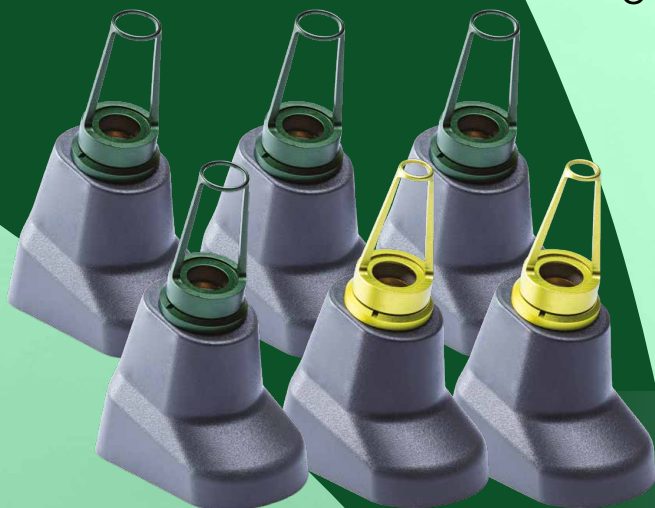

 **TechniLase**
distributeur de  **vydence**
votre partenaire laser
medical

ACROMA-QS®


POUR TOUTES LES COULEURS DE PEAU

Découvrez ACROMA-QS®, la dernière solution technologique de rajeunissement et traitement non ablatif des lésions pigmentaires pour tous les types de peau, qui a prouvé son efficacité clinique et sa sécurité même sur les peaux les plus foncées. Avec son grand nombre d'indications, notamment pour les mélasmes et les tatouages, ACROMA-QS® vous fera franchir un pas en termes de technologie et de rentabilité dans vos interventions.

LE TRAITEMENT LE PLUS SÛR, MÊME POUR LES PEAUX LES PLUS FONCÉES.

Compte tenu de la faible absorption par la mélanine du LASER Nd: YAG à 1064 nm et de l'effet photoacoustique propre associé, ACROMA-QS® est l'option thérapeutique la plus sûre pour le rajeunissement des peaux des catégories IV-VI selon la classification de Fitzpatrick, car elle stimule le collagène tout en protégeant l'épiderme.

ACROMA-QS® est un traitement avancé de rajeunissement par TONIFICATION LASER parfaitement adapté pour réduire les rides fines, la taille des pores et la brillance de la peau ; extrêmement sûr, il redonne également de la vigueur et de la vitalité à la peau et n'impose aucune durée d'arrêt, quel que soit le type de peau.

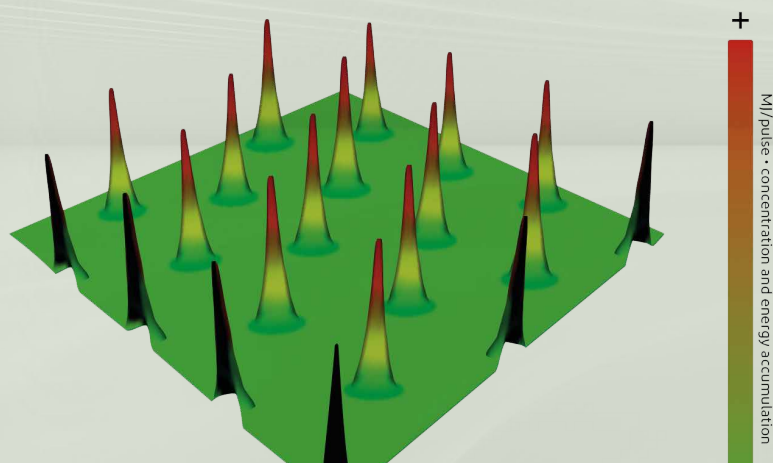

Le fractionnement de l'énergie LASER dans la pièce à main ACROMA-QS® q-switché génère des pics de chaleur compte tenu de l'irradiation plus forte et d'une concentration localisée de l'énergie. L'objectif est de renforcer l'impact de la perturbation photomécanique associée au LASER q-switché et de l'effet thermique tout en favorisant une pénétration relativement plus importante de l'énergie dans le tissu.



UNE NOUVELLE SOLUTION DE RÉJUVÉNATION NON-ABLATIVE.

ACROMA-QS® est une nouvelle solution technologique pour les traitements non-ablatifs du visage et du corps quasi sans douleur.

Une procédure ultra-rapide adaptée à tous les types de peaux, une éviction sociale minimale, des contre-indications minimales et des résultats visibles à court et moyen termes.

VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT DANS LA TECHNOLOGIE.

Intégré dans le système de plate-forme ETHEREA®, ACROMA-QS® vous ouvre de nouvelles possibilités d'interventions cliniques dans le domaine cosmétique et thérapeutique. S'ajoutant aux autres technologies déjà disponibles, ACROMA-QS® est un laser déclenché qui donne d'excellents résultats grâce à sa technologie de pointe et sa polyvalence et offre le meilleur ratio coût-bénéfice sur le marché ainsi qu'un vaste choix d'options de traitement. ACROMA-QS® intègre deux systèmes laser dans une seule pièce à main pour une puissance crête, une sécurité et une efficacité encore plus élevées.

DITES ADIEU AUX TATOUAGES ET AUX PIGMENTATIONS INDÉSIRABLES :

ACROMA-QS® donne d'excellents résultats pour le traitement des tatouages et des pigmentations. Outre ses indications pour les nævi, les taches café au lait, les lentigos, les mélanoses, les taches de rousseur, l'hyperpigmentation postinflammatoire et les verrues séborrhéiques, ACROMA-QS® intègre également la technologie LASER de référence pour le traitement des mélasmes et le retrait des tatouages indésirables en utilisant deux variations de longueur d'onde – Nd: YAG 1064 nm et KTP 532 nm – pour une efficacité et une sécurité maximales.

UNE TECHNOLOGIE POUSSÉE POUR DES RÉSULTATS ENCORE MEILLEURS.

Intégrant deux LASERS et deux longueurs d'onde dans une seule pièce à main – Nd:YAG 1064 nm et KTP 532 nm – ainsi qu'un grand nombre d'options de traitement, ACROMA-QS® fournit une puissance crête élevée, renforce la sécurité et donne des résultats encore meilleurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	ACROMA-QS®
LONGUEUR D'ONDE DU LASER	Nd:YAG 1064 nm
	KTP 532 nm
TAILLES DE SPOT DISPONIBLES	1064 nm 3, 5, & 7 mm
	1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm ² série de lentilles fractionnées
	532 nm, avec 3 & 5 mm
ÉNERGIE MAXIMALE	1,500 mJ
LARGEUR D'IMPULSION	20 ns
FRÉQUENCE DE RÉPÉTITION	Jusqu'à 5 Hz

Ces produits et/ou leurs indications de traitement décrits dans ce document peuvent ne pas être disponibles dans tous les territoires/pays. Veuillez contacter VYDENCE pour toute question sur ce sujet. VYDENCE se réserve le droit de ne pas vendre ce produit dans les territoires/pays où les autorités compétentes ne lui ont pas accordé d'autorisation de distribution et/ou de commercialisation.



An Adavium
Medical Company

VYDENCE® Medical USA Office
3340 Hillview Avenue Palo Alto, CA. United States

VYDENCE® Medical Factory and R&D
Rua Aldo Germano Klein, 359
13573-470 - São Carlos - SP - Brazil

VYDENCE® Medical Clinical Development Center
Av Fagundes Filho, 486, Sl 96 - S Judas
04304-000 - São Paulo - SP - Brazil

ADAVIUM® Medical Operations Office
Av. Queiroz Filho, 1560 - T Gaivota
05319-000 - São Paulo - SP - Brazil



TECHNILASE - Distributeur exclusif France :
ZAC des Fossés Neufs - 2, rue du Parc des Vergers - 91250 TIGERY
Tél. : 01 69 89 32 47 - email : contact@technilase.fr - www.technilase.fr

